

# 製薬用水


**MicroBio**  
R2A 寒天培地 が  
PPM024 (定量検査用)  
おすすめです!

- 製薬用水中(常水・精製水・注射用水)に含まれる低栄養細菌を検出できます。
  - 培地性能 試験成績書が添付されていて、安心して御利用いただけます。
  - メンブランフィルター法にも適しています。
- ◎ 1ml添加用乾燥寒天培地(SDM024)も  
ございます。

などの

**無菌検査**は、これで **万全**です。

細菌検査に、信頼と安心を!!

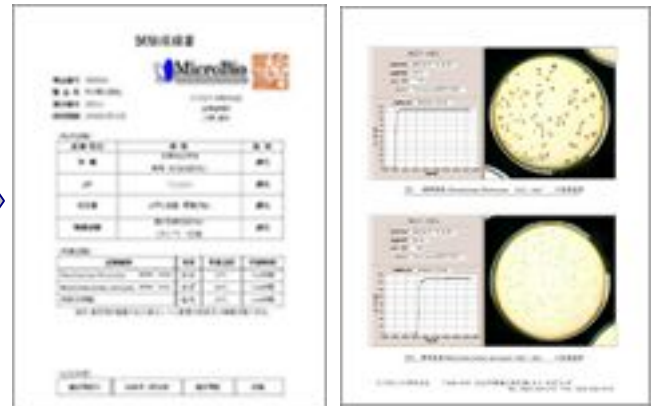

**MicroBio**  
生菌数検査サービス も  
おすすめです!

面倒な生菌数検査は  
マイクロバイオにお任せください!!

デジタル顕微鏡方式 細菌検出装置により、  
送付していただいた検体の生菌数検査を行い、  
結果データを CD-R に保存してお送り致します。

フルサービス: 滅菌済み 1ℓボトルを送ります。水(検体)を入れて送って頂くだけ。  
セルフサービス: 水を濾過したフィルターを R2A 培地に貼り付けて送って頂くだけ。

## Biomatic® DMCS


DMCS をご使用になれば、  
御社でも実施できます。  
デモ、長期レンタルなど、  
ご相談下さい!



S-12

全自動化・低コスト・高精度

検査結果データ(グラフ、画像付き)  
(培地性能 成績証明書と同じ形式)

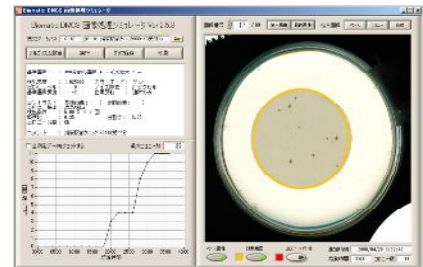

寒天培地			
製品番号	用途	入数	定価
PPM024	R2A 寒天培地 (0.1ml 添加用)	240 枚/箱	¥50,400
SDM024	R2A 寒天乾燥培地 (1ml 添加用)	240 枚/箱	¥50,400

検査サービス[Biomatic DMCS 装置使用]			
製品番号	用途	単位	定価
TST01	一般細菌検査料(寒天培地)	1 検体	¥5,300
TST02	一般細菌検査料(1ℓボトル)	1 検体	¥23,000

※10 枚入り,100 枚入りについてはお問い合わせください

〒105-0004 東京都港区新橋 5-7-10 新橋 SNビル 1F  
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165  
[www.microbio.co.jp](http://www.microbio.co.jp)

細菌検査用具・機器、製造販売

**MicroBio**  
Corporation

マイクロバイオ株式会社

製薬用水


などの

毎日の無菌検査が  
簡単に実施 できます !!

SensiMedia®

A-SML 024 が  
(一般細菌水質用)  
おすすめです!

全国300以上の透析施設で  
水の無菌検査に採用されています。

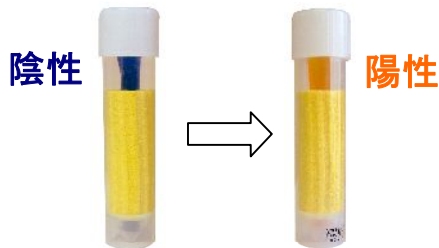

- 試料(水) 10ml をセンシメディアに入れて、部屋(室温 23~27°C)に放置(培養)するだけ。
- センサーが黄色になれば、陽性です。青色のままなら、陰性です。

簡単

試料(水)を入れて、部屋(室温で)に放置(培養)するだけです。分かりやすいセンサーがお知らせします。

確実

10ml の水に 1 細菌(1cfu)がいれば 反応する いい感度です。

安価

毎日の検査にぴったりの 10 本入りパックを用意しています。

水質基準 10cfu/100ml を  
チェックするには 2 本使用します。

SensiMedia (試料 10ml 添加用)			
製品番号	用途	入数	定価
A-SML024-100	一般細菌 水質用	100 本	¥38,000
A-SML024-10	一般細菌 水質用	10 本	¥4,500

判定基準	合格	合格 (要注意)	不合格
陽性本数	0/2	1/2	2/2

〒105-0004 東京都港区新橋 5-7-10 新橋 SNビル 1F  
TEL (03) 5425-2161 FAX (03) 5425-2165  
[www.microbio.co.jp](http://www.microbio.co.jp)

細菌検査用具・機器、製造販売  
 **MicroBio**  
Corporation  
マイクロバイオ株式会社